



PHALLOSAN[®] forte

ISTRUZIONI PER L'USO

Congratulations per l'acquisto del suo PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte viene utilizzato con successo in tutto il mondo da 18 anni. PHALLOSAN® forte viene rimborsato con ricetta dalle casse di assicurazione malattia. Il nostro team di urologi e tecnici medici ha sviluppato il prodotto che, dal nostro punto di vista, è il più efficace e innovativo nel suo genere: PHALLOSAN® forte.

Scopo e indicazioni:

- PHALLOSAN® forte è consigliato per il trattamento di
- » Ingrossamento-allungamento del pene
 - » Pene curvo congenito/ereditario e induratio penis plastica (IPP)
 - » Disturbi erettili e impotenza
 - » Trattamento post-operatorio in seguito a operazione alla prostata
 - » Esercizi per i corpi cavernosi del pene a qualsiasi età

Contenuto della confezione:

1. Cintura elastica da passare intorno alla vita, inclusi Anello in materiale espanso (A), in cui viene inserito il pene fino alla base. Fibbia scorrevole (B) con cui potete regolare la lunghezza della cintura, e adattatore (C) sulla cintura, che viene collegato con l'unità della capsula di aspirazione.
2. a) Campana di aspirazione di misura S con preservativo isolante S PHALLOSAN® forte
2. b) Campana di aspirazione di misura M con preservativo isolante M PHALLOSAN® forte
2. c) Campana di aspirazione di misura L con preservativo isolante L PHALLOSAN® forte e forcella di trazione (3)
3. Forcella di trazione con dispositivo a molla per la regolazione della forza di trazione nel sistema di regolazione con adattatore per la cintura.
- 4./5. Calotta protettiva per il glande, per proteggerlo in caso di regolazione eccessiva della trazione.
6. Pompa di aspirazione con triplo distributore
7. Sagoma di misurazione

Istruzioni per l'uso

Borsa da viaggio



Preparazione all'uso

1. Cintura



Stendete la cintura ortopedica PHALLOSAN® forte davanti a voi e regolatela con la fibbia scorrevole (B) sulla parte più lunga.

2. Selezione della campana di aspirazione/del manicotto di tenuta

Con la sagoma di misurazione (7) determinate la misura della campana di aspirazione adatta a voi. Allontanate il pene non eretto dal corpo e misurate il tronco del pene.



La campana di misura M (2c) è già collegata nel kit al manicotto di tenuta di misura M (2c) e alla forcella di trazione con dispositivo a molla di trazione.

Nel caso in cui abbiate bisogno di un'altra misura, rimuovete la forcella di trazione (3).

Prendete ora la campana adatta a voi e adattatela alla pompa di aspirazione, che scatta solo nella posizione con il simbolo della freccia (↑). Il manicotto di tenuta adatto (2) viene ripiegato sul rigonfiamento della campana e la forcella di trazione (3) viene rimontata.



Fare grande attenzione a che il rigonfiamento della campana si innesti nella scanalatura del manicotto di tenuta nella parte più grossa del manicotto. Se il manicotto di tenuta viene tirato troppo sul rigonfiamento della campana, si romperà.





Sopra: Sbagliato: tirato troppo sulla campana e senza talco!

Sotto: Posizione giusta, e con talco.

Fare attenzione: dopo alcuni giorni il manicotto di tenuta perde il suo strato esterno. Per questo motivo dovete procurarvi del talco per bambini e applicarlo sulla superficie esterna del manicotto di tenuta. Si crea uno strato protettivo, che protegge il manicotto di tenuta da attrito, adesioni esterne e strappi.

Bloccare la campana di aspirazione tra le ginocchia. Con attenzione fate scorrere con una leggera trazione il manicotto 1 cm isolante fino al bordo della campana di aspirazione, e

infilatelo dietro il rigonfiamento della campana. Fate attenzione a non danneggiare il manicotto di tenuta con unghie aguzze o simili. Nello srotolare il manicotto non tirate con troppa forza.

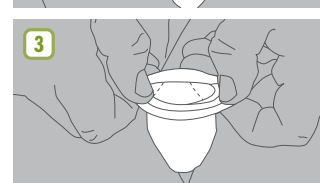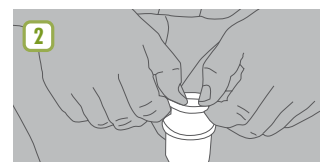




Caratteristiche dei nuovi manicotti di tenuta PHALLOSAN®

I manicotti di tenuta PHALLOSAN® forte sono composti da silicone medico, per escludere irritazioni o reazione allergica. Questa innovazione non solo vi offre un miglior comfort: il manicotto aderisce perfettamente al membro. In un punto è spesso circa 3 mm: lì viene applicato alla campana; nel punto più sottile misura 0,3 mm di spessore, per potere aderire in modo delicato al tronco del pene.

La campana di aspirazione perfetta per voi è pronta per l'uso!

3. Calotta protettiva

Rimuovete la calotta protettiva (4/5), adatta per qualsiasi misura del pene. Tiratela con i pollici e gli indici di entrambe le mani e infilatela sul glande. Deve aderire in modo stretto.

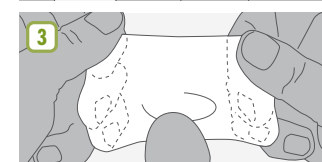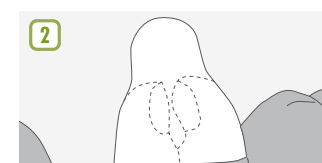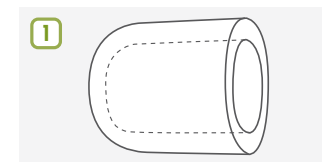

È importante che dopo aver applicato la calotta ci sia sulla punta del glande la minor quantità possibile di aria. È di aiuto applicare la calotta protettiva quando il pene è leggermente eretto. La calotta protettiva deve proteggere il glande dagli effetti indesiderati di una possibile situazione di eccessiva trazione. Gli utenti esperti,

dopo qualche settimana, possono anche fare a meno della calotta protettiva.

Tutti i preparativi per l'utilizzo sono stati ora completati.

Utilizzo:

1. Inserite ora il pene, con la calotta protettiva, nella campana di aspirazione, e srotolate il manicotto di tenuta sul pene partendo dal rigonfiamento della campana.



2. Girate il nottolino della valvola sulla pompa di aspirazione (6) sul simbolo di aspirazione e attivate la pompa di aspirazione schiacciandola ripetutamente con le dita. In tal modo il glande viene aspirato ancora più a fondo nella campana. Il manicotto di tenuta aderisce morbidamente al tronco del pene.



3. Impostate ora il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione (6) sul simbolo di chiusura per mantenere correttamente la situazione sottovuoto.



4. Prendete ora la cintura che avete già steso davanti a voi e infilate l'anello bianco in materiale espanso (A) sull'intero dispositivo della campana di aspirazione fino a fargli raggiungere la base del pene.

5. Passate ora l'estremità della cintura intorno ai fianchi.

6. Girate ora la clip della forcella di trazione (3) con l'estremità aperta verso il corpo, e collegare i due occhielli (C).



7. Aumentate la tensione della cintura con l'aiuto della fibbia scorrevole (b) fino a quando sentite che il pene viene allungato e il sistema di segnalazione indica verde. Fate in modo che la cintura passi sull'inguine diagonalmente verso l'alto. A tal fine tirate la cintura da dietro verso l'alto in direzione della vita. Se la cintura rimane all'altezza del solco intergluteo, quando vi sedete la forza di trazione aumenterà: cosa che non deve succedere.



8. Ora potete dedicarvi normalmente alle vostre attività quotidiane, oppure indossare PHALLOSAN® forte anche durante il sonno, poiché la circolazione del sangue non subisce mai nessuna costrizione.

Terminare l'utilizzo

Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto. **Rimuovere attentamente il guanto arrotolando all'indietro verso la coppetta in plastica dura ed estrarre completamente il dispositivo. Non allargare il guanto con le dita per rimuovere il vuoto d'aria; in caso contrario si strapperebbe immediatamente.** Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Caratteristiche tecniche

Vi preghiamo di tenere a mente che si tratta, in modo semplificato, di una campana di aspirazione con tenuta isolante. Quindi non è importante il punto che il manicotto di tenuta raggiunge sul tronco del pene. Il manicotto di tenuta non è fatto per trasmettere la trazione al pene: la trasmissione della forza di trazione avviene esclusivamente attraverso il sottovuoto che si crea nella campana.

Se indossando il dispositivo doveste notare che il sottovuoto diminuisce leggermente e il glande, eventualmente, si sposta troppo all'interno della campana, ciò può avere diverse cause. In

qualsiasi caso significa che sta entrando dell'aria. Ciò può avvenire dal tronco del pene, se i peli pubici non sono stati rimossi con attenzione, oppure se si è scelto un manicotto di tenuta troppo grande.

Se necessario rimuovete gli eventuali peli pubici dal pene. Potete farlo utilizzando un rasoio o con una crema depilatoria delicata.

Rimedio

Girate il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione dal simbolo di chiusura a quello di aspirazione.

Aspirate così nuovamente il glande nella campana e chiudete la ventola ruotando nuovamente il nottolino verde in direzione del simbolo di chiusura.

Se il glande continua a scivolare dalla campana, la causa è chiaramente il manicotto di tenuta troppo grande.

Avete la possibilità di adattarli autonomamente alla vostra misura, al fine di ottenere la massima efficienza. Se per esempio sentite che la campana M è della giusta misura per voi, ma che il manicotto di tenuta M è troppo largo sul pene, potete fissare il manicotto di tenuta S sulla campana M. Potete fare lo stesso con la campana L e il manicotto di tenuta M.

Evitate assolutamente di mettere il manicotto di tenuta S sulla campana L. Il materiale si strapperebbe.

Indicazioni per la manutenzione FORTE/PLUS:

Il manicotto di tenuta può e deve essere rimosso dalla campana, e per motivi igienici deve essere lavato a mano con acqua tiepida e sapone.

Conservate il manicotto di tenuta srotolato fino al nuovo utilizzo.

Non dimenticate mai di polverizzare con borotalco il manicotto di tenuta srotolato dopo averlo usato.

Anche la campana di aspirazione deve essere pulita giornalmente come descritto sopra. Rimuovete però come prima cosa la pompa di aspirazione muovendo il nottolino verde della valvola della pompa in direzione della doppia freccia. Tirando con attenzione, rimuovete la pompa aspirante dalla campana di aspirazione.

La pompa aspirante non deve venire in contatto con acqua o grasso, perché altrimenti le valvole, che sono sensibili, non funzionano più liberamente.

Piano graduale per adattare con esattezza l'intensità di trazione della cintura al tessuto connettivo del pene.



Premessa:

Il tessuto connettivo del corpo dipende dalla disposizione ereditaria di ciascuno. Per questo motivo abbiamo sviluppato un sistema di regolazione che vi permette di adattare perfettamente la tensione della cintura al vostro tessuto connettivo. Fate comunque attenzione, all'inizio, a mantenere l'intensità di trazione nel settore inferiore verde. In tal modo otterrete i risultati ottimali di un ingrossamento del pene in lunghezza e circonferenza, senza effetti collaterali.

1. Giorno

Impostate la tensione di trazione solo nel settore inferiore verde e indossate PHALLOSAN® solo per un'ora. Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto.

Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Valutate ora la zona intorno al pene tra l'uretra e quel sottile lembo del prepuzio (frenulo) che si trova nella parte inferiore del glande. Questa zona è il punto del pene in cui il tessuto è più sensibile. Se questa zona è arrossata o si è gonfiata, la tensione della cintura era troppo forte. Per questa giornata interrompete l'utilizzo. Nel caso in cui abbiate rilevato cambiamenti nel pene, ricominciate con l'uso solo quando questi cambiamenti sono rientrati.

2. Dal 2° all'8° giorno Giorno

Se il giorno precedente avete potuto indossare PHALLOSAN® forte senza subire arrossamenti o rigonfiamento nella zona descritta, potete indossare PHALLOSAN® per un'ora in più.

Ogni giorno prolungate di un'ora il periodo in cui lo indossate. Dopo 8 giorni il periodo di adattamento è concluso.

Dopo la fase di adattamento PHALLOSAN® può essere indossato anche di notte. Noterete che su entrambi i simboli per pompare e chiudere sono applicati due nottolini in rilievo, per poter pompare o chiudere anche senza vedere il dispositivo. Il manicotto di tenuta si allunga in caso di erezione notturna: l'irrorazione sanguigna non viene impedita, quanto invece migliorata.

Sarete entusiasti di indossare PHALLOSAN® forte: in poche settimane il pene può diventare più lungo, tanto da poter misurare la differenza, e aumentare la circonferenza. Sentirete effetti secondari positivi, come maggior impulso e desiderio sessuale.

Durata dell'utilizzo:

PHALLOSAN® deve essere indossato giornalmente 8-10 ore al giorno, sei giorni alla settimana, a volte anche più a lungo!

Effetti indesiderati/misure precauzionali

L'utilizzo di PHALLOSAN® forte avviene a proprio rischio, ma non è pericoloso se ci si attiene alle istruzioni per l'uso. Bisogna comunque evitare, in particolare nelle prime settimane di utilizzo, di applicare eccessiva trazione al pene.

In caso di rigonfiamenti e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, significa che la tensione della cintura è eccessiva. Dovete sospendere immediatamente, fino a quando il gonfiore o le vesciche non guariscono. In seguito impostate una trazione leggermente inferiore. Abbiate un po' di pazienza: il procedimento, per il successo di utilizzo, può essere paragonato a un allineamento ortodontico: non solo la forza di trazione, ma anche la continuità della tensione sono garanzia di successo! A volte potreste sentire un dolore alla pressione sul tronco del pene: ciò può essere causato dal fatto che il rigonfiamento del manicotto di tenuta appoggia sull'anello di schiuma di silicone, provocando dolore.

Tutti gli incidenti gravi relativi al dispositivo de-

vono essere notificati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente sono stabiliti.

Rimedio:

Arrotolate una parte dell'estremità del manicotto di tenuta liberando l'anello di schiuma di silicone: il dolore alla pressione scomparirà.

Potete anche distribuire la tensione di trazione della cintura sul corpo, per ridurre la tensione alla base del pene. Afferrate la cintura nell'area di collegamento alla campana di aspirazione, e indirizzate la tensione di trazione intorno al corpo per alleggerire la base del pene. Sembra complicato, ma non lo è: la tensione di trazione si distribuisce sull'intera area della cintura.

Controindicazioni:

Dopo consumo di alcol, droghe e farmaci antidolorifici, sonniferi e tranquillanti, perché la naturale percezione del dolore può essere influenzata da queste sostanze, e voi potreste non reagire tempestivamente ai dolori. Evitate l'utilizzo di PHALLOSAN® forte in caso di infezioni o ferite vive sul pene.

Come misuro esattamente l'incremento di lunghezza del pene?

Utilizzate un metro pieghevole. Un metro a nastro non è adatto. Tenete il pene non eretto perpendicolarmente al corpo (90 gradi). Guardando dall'alto, mettete il metro pieghevole di fianco al pene. Premete il metro pieghevole contro il pube.

Importante

All'inizio dell'uso misurate il vostro peso esatto senza vestiti. Quando si ingrassa, nella zona pubica, in particolare nell'area pelosa intorno al pene, si crea uno strato di grasso. Questo strato di grasso accorcia la distanza della punta del pene dal pube, e altera (accorciandola) la misurazione. I medici chiamano questo fenomeno addome pendolo.

Ordini supplementari

Tutte le parti di PHALLOSAN® forte possono essere ordinate singolarmente qui da noi. In caso di ulteriori domande o curiosità, i nostri esperti sono a vostra disposizione gratuitamente per telefono, alle normali tariffe telefoniche.

Riserva di modifiche tecniche, che pubblichiamo anche sui siti web www.phallosan.it

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare PHALLOSAN® plus+. Questo è un kit addizionale a PHALLOSAN® forte e può essere utilizzato solamente in abbinamento alla confezione PHALLOSAN® forte! Per istruzioni relative a PHALLOSAN® forte si prega di visitare la pagina www.phallosan.info!

Contenuto della confezione PHALLOSAN® plus+:

- La leva di regolazione
 - » Applicabile a campane di qualsiasi misura
 - » Flessibilità di movimento
 - » Clip di sicurezza
 - » Rimozione semplice
 - » Brevettata
- Il sistema a bacchette con anello base bianco
 - » Estendibile per peni di ogni dimensione
 - » Tensione ottimale
 - » Livello di forza elevato o comodo a scelta
- Calotta protettiva
 - » Dispositivo pressurizzato per l'area del glande
 - » Maggiori risultati grazie a
 - » più forza
 - » più sicurezza
 - » prestazioni più elevate

Contenuto della confezione PHALLOSAN® forte:

- Campana dura in plastica con preservativi isolanti annessi
 - » Fino a 4 tagli per ogni tipo di virilità
 - » Sicurezza trasparente
 - » Disponibile taglia media (campana larga-manicotto medio)
 - » Materiale anallergico
 - » Sistema a 3 valvole
 - » La comodità incontra l'efficacia
- Pompa a vuoto integrata
 - » Crea un micro-vuoto
 - » Non è nociva per tessuti/corpi spugnosi/vene
 - » Miglior risultato
 - » Massimo esito




Preparazione:

1. Selezione della coppa di aspirazione/del manicotto (dalla confezione PHALLOSAN® forte)


Scegliere la campana dura in plastica corretta e la taglia del preservativo isolante utilizzando il modello di misurazione. Allontanare il pene in stato flaccido dal proprio corpo e prendere la misura del corpo del pene.

Attaccare la pompa a vuoto alla campana dura in plastica; essa si incastra in posizione solo seguendo il simbolo della freccia (↑). Ruotarla verso il simbolo della pompa (⬇).


Arrotolare il preservativo isolante sulla campana dura in plastica. Nell'attaccare il manicotto alla coppa, si prega di assicurarsi che la parte spessa (la scanalatura) del manicotto sia posizionata esattamente sul bordo della campana dura in plastica.

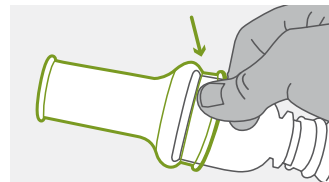


È possibile danneggiare il manicotto se viene tirato troppo sopra il bordo della coppa.

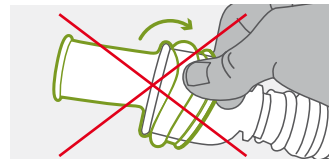

Arrotolare con cautela il manicotto sul bordo della coppa di aspirazione fino a quando non vi sia 1 cm di spazio tra il manicotto arrotolato e il bordo della coppa di aspirazione.


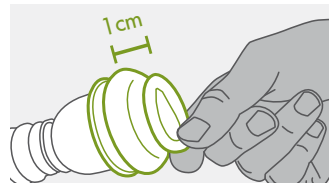


È ora possibile tirare con facilità il manicotto arrotolato dietro il bulbo della coppa di aspirazione. Mettere da parte la coppa di aspirazione e il manicotto e andare al punto successivo.

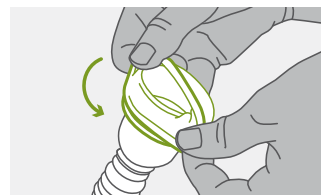

2. Calotta protettiva

Smontare la calotta protettiva usando entrambe le mani e farla scivolare sul glande. Dev'essere indossata in modo che sia comoda, ma stretta.

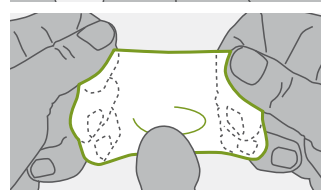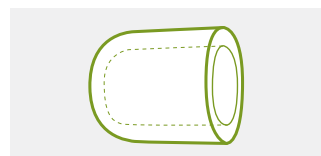


Dopo aver collocato la calotta protettiva, è importante assicurarsi che sulla punta del glande rimanga la minor quantità d'aria possibile.

Mettere ora da parte la campana dura in plastica/il manicotto/la pompa montati.

3. Sistema a bacchette


Prendere il sistema a bacchette e tenere l'anello di base bianco proprio di fianco alla radice del pene. Estendere o ridurre le asticelle in modo tale da essere 5 cm (2 pollici) più lunghe del pene in stato flaccido.

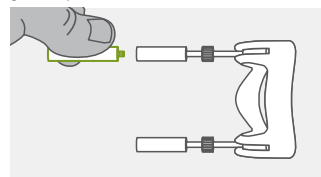

Collocare l'anello di base bianco sul proprio pene (meglio se da seduti). Attaccare la leva di regolazione all'estremità delle bacchette.

Applicazione:


- Prendere ora la campana dura in plastica/il manicotto/la pompa precedentemente preparati. Collocare il glande a metà nella campana e srotolare quanto si desidera il preservativo isolante.

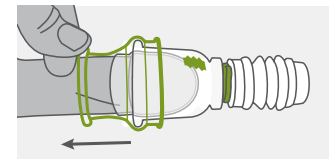

- Premere la pompa 3-5 volte e ruotare la valvola verde verso il simbolo del lucchetto.




- Premere infine le bacchette e la leva di regolazione in basso e attaccare la clip C sulla campana dura in plastica e lasciare andare.

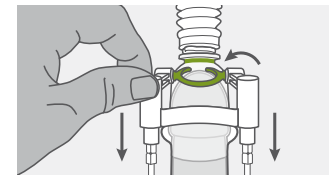

- Si dovrebbe ora sentire e vedere che il pene è stirato.

Importante: l'ottenimento dell'esito massimo non dipende dall'esercizio di una forza elevata, ma dalla continuità.

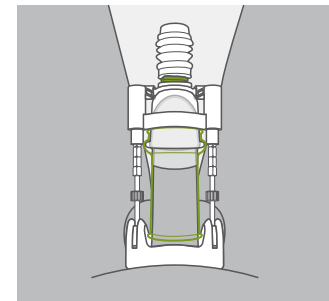

Come rimuovere PHALLOSAN® plus+:

Si prega di ruotare per prima cosa la valvola verde della campana di aspirazione seguendo il simbolo della freccia. Si perde così il vuoto. Si prega di arrotolare nuovamente il manicotto con cautela verso la coppa dura in plastica e di rimuovere l'intero dispositivo di aspirazione. **Non estendere il manicotto con le dita poiché altrimenti potrebbe rompersi immediatamente.** Si rimuoverà con facilità semplicemente arrotolando il manicotto verso l'alto.

Effetti collaterali / Precauzioni

PHALLOSAN® plus+ viene usato a rischio e pericolo dell'utilizzatore, ma è sicuro se si seguono le istruzioni per l'uso. Tuttavia, soprattutto durante le prime settimane di utilizzo, il pene non dovrebbe essere tirato troppo forte.

Se compaiono gonfiori e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, l'impostazione è troppo forte. È essenziale fare una pausa finché il gonfiore o le vesciche non sono guariti.

Poi regolare la tensione un po' più leggera. Abbiate pazienza, la procedura è paragonabile per successo ad una regolazione della mascella. La continuità dello stiramento, non solo la forza della tensione, è la garanzia del successo!

Attenzione: L'uso di Phallosan plus non è adatto durante il sonno! Si prega di utilizzare PHALLOSAN® forte per questo scopo.

Ora si ha una trazione dalla combinazione perfetta. Non importa quale sia lo scopo:

Allungamento del pene:

Utilizzare la leva di regolazione per almeno 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

L'ottenimento della stimolazione cellulare non dipende dall'esercizio di una forza elevata, ma dalla continuità.

In tal modo, verranno impiantate nuove cellule e si potrebbe ottenere un aumento di 1,9 pollici in lunghezza e di 1,1 pollici in spessore.

Disfunzione erettile:

Un utilizzo per 5 ore, 3 giorni a settimana aumenterà notevolmente la circolazione sanguigna e stimolerà pertanto la prostata e il desiderio sessuale. Il corpo spugnoso sarà in grado di catturare più sangue e le erezioni arriveranno quindi più frequentemente e dureranno di più.

IPP/Deviazione del pene:

L'IPP/la deviazione del pene può essere curata abbinando PHALLOSAN® forte alla leva di regolazione. Importante: utilizzare PHALLOSAN® forte per 4 giorni a settimana e la leva di regolazione per 2 giorni per raddrizzare la curva. La deviazione verrà raddrizzata completamente quando avverrà l'implantazione di nuove cellule nel tessuto cicatriziale intorno all'area curva. Ecco che così il pene verrà completamente raddrizzato.

Hotline:

E-Mail: service@swissana.com

Per maggiori informazioni:

www.phallosan.info

Il vostro team Phallosan® forte



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+



SI PREGA DI LEGGERE COMPLETAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO!

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SEGUENTI PRECAUZIONI

Il dispositivo non deve essere indossato quando si urina, durante le attività sportive, durante i rapporti sessuali o altre attività fisiche faticose.

Non dovrebbe essere indossato neanche dopo aver consumato alcol o ingerito antidolorifici o euforizzanti o:

- se vi sono ferite o zone infette sul pene o altre zone dove PHALLOSAN® è adiacente al corpo.
- se vi è dolore, intorpidimento o dislocazione del glande,
- o se avviene qualsiasi altra reazione imprevista, il dispositivo deve essere allentato e rimosso immediatamente.

In caso di ferite sul pene, il dispositivo non deve essere indossato fintanto che esse non siano guarite completamente.

In caso di intervento chirurgico, non usare PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ finché il medico non ne dà l'autorizzazione.

Non usare PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ se si soffre di problemi venosi o di debolezza del tessuto connettivo.

Non usare il dispositivo se si ha qualsiasi genere di piercing nell'area genitale.

Il dispositivo non deve essere indossato quando ci si muove in zone in cui vi è un elevato rischio di cadere e deve essere prestata cautela salendo le scale, camminando su pavimenti scivolosi ecc.

Il dispositivo non dovrebbe essere indossato quando si maneggia qualsiasi tipo di macchinario, veicolo motorizzato o oggetto ardente o andando in bicicletta o cucinando.

Non applicare alcuna crema, vasellina o altre sostanze idratanti quando si indossa/usa il dispositivo.

Usare il dispositivo solo come descritto in questo manuale, non usare alcun altro materiale rispetto a quello fornito o usare altre tecniche di vestizione rispetto a quelle descritte nel manuale.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non siamo responsabili per alcun danno causato dall'uso di prodotti o servizi acquistati attraverso questo sito internet, che si tratti di danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali (inclusi ma non limitati a danni per perdita di affari, perdita di profitti, interruzioni o simili). Se vi sono domande relative ai termini d'uso riportati qui, non si esiti a contattarci in qualsiasi momento.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

In caso di rischi o effetti collaterali
si prega di contattare il proprio medico
o la nostra hotline Phallosan



REF 5000

