



PHALLOSAN[®] forte

BRUKSANVISNING

Grattis till köpet av din PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte används sedan 18 år tillbaka över hela världen. Till och med sjukvård har börjat ersätta PHALLOSAN® forte som erhålles på recept. Vårt team bestående av urologer och medicintekniker har utvecklat den enligt vår åsikt mest effektiva och mest innovativa produkten av sitt slag, PHALLOSAN® forte.

Doel en aanwijzingen:

PHALLOSAN® forte rekommenderas för behandling av

- » Penisförlängning-penisförlängning
- » Medfödd/peniskrökning och induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- och potensstörning
- » Postoperativ efterbehandling efter prostata-operation
- » Erektionsträning för alla åldrar

Förpackningsinnehåll:


1. En elastisk rem, som placeras kring midjan inkl. skumgummiring (A), i vilken penisens förs in till roten. Skjutspänne (B), med vilket remmen kan ställas in på längden och adapter (C), som ansluts till sugklockan.
2. a) Sugklocka i storlek S med PHALLOSAN® forte – S-manschett kondom
2. b) Sugklocka i storlek M med PHALLOSAN® forte – M-manschett kondom
2. c) Sugklocka i storlek L med PHALLOSAN® forte – L-manschett kondom och sammansatt spännclip (3)
3. Spännclip med spännfjäder för att justera spänningens intensitet med hjälp av ett trafikljus kodsyste med adapter till bältet.
- 4./5. Skyddslock för att skydda ollonet mot stark inställning av spänningen.
6. Sugball med 3-vägsventil
7. Mätmall

Bruksanvisning

Transportväska med 4 extra manchett kondomer (1 x S, 2 x M, 1 x L)

Förberedelse till användning


1. Rem

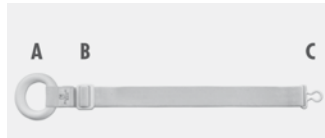

Bred ut den ortopediska PHALLOSAN® forte remmen framför dig och ställ in den på största möjliga längden med hjälp av skjutspännet (B).

2. Val av sugklocka/manschett-kondom

Beräkna den storlek på sugklockan som passar dig med medföljande mätmodell (7). Dra undan den icke erigerade penis från kroppen och mät på penisskaffet.

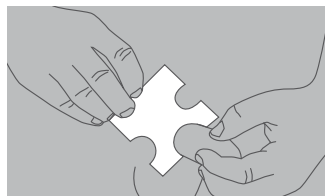

Klockan storlek M (2c) är redan ansluten till manchett-kondomen storlek M (2c) och dragstängens med dragfjädern, som tillhör detta set.

Skulle du behöva en annan storlek, måste du ta bort dragstängens (3).

Ta nu en klocka som passar dig och anslut den till sugpumpen, denna klickar endast fast när den befinner sig i läget med pilensymbolen (↓). Den lämpliga manchett-kondomen (2) dras över klockans vulst och dragstängens (3) sätts åter på plats.



När klockan sätts på plats måste du förvisa dig om, att klockans vulst klickar fast i manchett-kondomens spår på kondomens tjocka ände. Dras manchett-kondomen för långt över klockans vulst, går kondomen sönder.





Ovan: Fel, dragen för långt över klockan och inte pudrad!

Nedan: Rätt, och pudrad.

Beakta, att manchett-kondomen förlorar sin beläggning efter endast några dagar. Köp därför barnpuder och strö detta på manchett-kondomens yttre ytor. Det bildas ett skyddande lager, som skyddar manchett-kondomen mot slitage, mot att klistra igen och mot att slitas sönder.

Kläm fast sugklockan mellan dina knä. Rulla manchett-kondomen försiktigt med ett lätt drag fram till sugklockans kant och dra den över klockans vulst. Var försiktig och skada ej

manchett-kondomen med skarpa fingernaglar, eller liknande. Dra inte för hårt när du rullar av den.

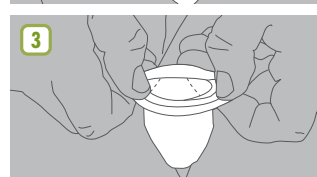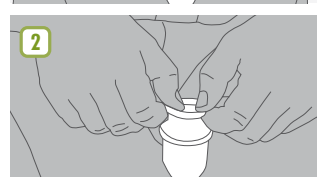





De nya PHALLOSAN® forte manchett-kondomernas – speciella egenskaper

PHALLOSAN® forte manchett-kondomerna består av medicinskt silikon, därmed är retningar eller allergiska reaktioner uteslagna. Denna innovation ger inte bara en bättre komfort, utan manchett-kondom följer lemman på ett enastående sätt. På ett ställe är den ca 3 mm tjock, där ansluts den till klockan, det tunnaste stället är 0,3 mm tjockt, för att kunna vara mjuk och följsam kring penisskaffet.

Den för dig perfekta sugklockan är klar för användning!

3. Skyddshätta

Ta ut skyddshättan (4/5), som passar till varje penisstorlek. Dra isär skyddshättan med båda händernas tummar och fingrar och dra den över ollonet. Den bör sitta åt.

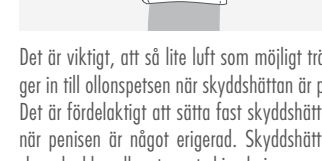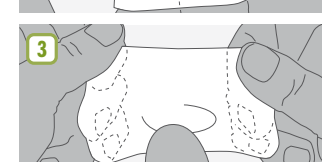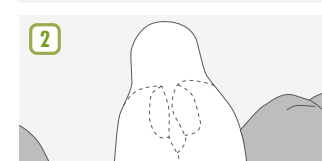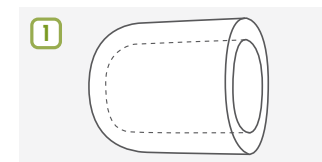

Det är viktigt, att så lite luft som möjligt tränger in till ollonspetsen när skyddshättan är på. Det är fördelaktigt att sätta fast skyddshättan när penis är något erigerad. Skyddshättan ska skydda ollonet mot biverkningar som förorsakas av en för stark draginställning. Erfarna användare kan efter några veckor

klara sig utan skyddshätta.

Alla nödvändiga förberedelser för användning är nu avslutade.

Användning:

1. För nu in penisens med skyddshättan i sugklockan och rulla ned manchett-kondomen från klockans vulst över penisens.



2. Vrid den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på sugsymbolen och använd sugpumpen genom att trycka på denna upprepade gånger med ett finger. Ollonet sugas på detta sätt ännu längre in i klockan. Manchett-kondomen följer mjukt längs penisskaffet.



3. Ställ nu in den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på slottssymbolen, för att upprätthålla det uppnådda mikro vakuum.



4. Ta nu den rem du brett ut framför dig och dra den vita skumgummiringen (A) över hela sugklockans anordning tills den ligger an mot penisroten.

5. Placera nu remmens ände kring din höft.

6. Dra nu dragstängens (3) spänne med den öppna änden mot kroppen och koppla ihop de båda öglorna (C).



Hotline:E-post: service@swissana.com

För ytterligare information:

www.phallosan.info

PHALLOSAN® forte teamet

**LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN****VARNING: AV SÄKERHETSSKÄL BEAKTA FÖLJANDE UPPLYSNINGAR.**

Utrustningen får inte bäras när du urinerar, idrottar, har samlag eller utövar annan ansträngande kroppslig aktivitet.

Den bör inte heller bäras efter det att du konsumerat alkohol eller intagit smärt- eller rusningsmedel. Inte heller vid:

- Sår eller inflammerade ställen på penis eller andra kroppsdelar, som kommer i kontakt med PHALLOSAN®-bältet,
- Smärta, dövhetskänsla eller missfärgningar på allonet
- Andra icke önskade reaktioner. Om detta händer måste utrustningen omedelbart lossas och tas bort

Vid skador på penis får utrustningen inte användas förrän dessa är fullständigt läkta. Använd PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ först efter en operation när din läkare godkänt det. PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ får inte användas om du har problem med venerna eller svag bindväv.

Använd inte utrustningen vid piercing i underlivet oavsett vilken typ det handlar om. Utrustningen får inte bäras i områden med fallrisk.

Var extra försiktig när du går i trappor eller på hala underlag.

Utrustningen får inte bäras när du hanterar maskiner, fordon eller varma föremål samt när du cyklar eller lagar mat.

Använd inte krämer, vaselin eller andra fuktgivande ämnen när du bär/använder utrustningen.

Använd utrustningen endast så som det beskrivs i denna handbok.

Använd endast de material som medföljer. Använd ingen annan teknik för att bära utrustningen än den som beskrivs i denna handbok.

Vi ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av produkter eller tjänster som köpts via den här webbplatsen. Detta gäller för alla direkta eller indirekta skador, åtföljande skador eller följdskador (inklusive men inte utslutande skador och förluster genom driftavbrott, förlorad vinst, avbrott och liknande). Om du har frågor om de användningsvillkor som finns här, kan du kontakta oss när som helst.



Swiss Sana AG

Kirchstrasse 3

9490 Vaduz

FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

Vid risker eller biverkningar

kontakta din läkare

eller vår Phallosan-hotline



REF 5000

