



PHALLOSAN[®] forte

MODE D'EMPLOI

Félicitations pour l'achat de votre PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte est utilisé dans le monde entier depuis 18 ans. PHALLOSAN® forte peut être remboursé par les caisses d'assurance maladie sur ordonnance. Notre équipe d'urologues et de techniciens médicaux a développé le produit le plus efficace et le plus innovant à notre avis, PHALLOSAN® forte.

Objet et indications:

- PHALLOSAN® forte est recommandé pour le traitement de
- » agrandissement du pénis – allongement du pénis
 - » Hypoplasie pénienne congénitale/acquise et Induratio penis plastica (IPP)
 - » Troubles de l'érection et de la puissance
 - » Traitement postopératoire des interventions sur la prostate
 - » Développement du tissu érectile pénien à tout âge

Contenu de l'emballage:

1. Ceinture élastique, qui se fixe autour de la taille, avec anneau en mousse (A), dans lequel le pénis est inséré jusqu'à sa base. Boucle coulissante (B), pour le réglage de longueur de la ceinture et adaptateur (C) pour relier la ceinture à la cloche d'aspiration.
 2. a) Cloche d'aspiration taille S avec PHALLOSAN® forte – Préservatif à manchette S
 2. b) Cloche d'aspiration taille M avec PHALLOSAN® forte – Préservatif à manchette M
 2. c) Cloche d'aspiration taille L avec PHALLOSAN® forte – Préservatif à manchette L et patte de traction intégrée (3)
 3. Patte de traction avec dispositif de réglage à ressorts pour ajuster la force de traction dans le système d'aspiration avec adaptateur pour la ceinture.
 - 4./5. Capuchon de protection du gland, pour protéger celui-ci en cas de réglage de traction trop intense.
 6. Pompe aspirante avec vanne 3 voies
 7. Gabarit de mesure
- Mode d'emploi
Sac de voyage avec 4 gratuit Préservatif à manchette (1xS,2xM,1xL)



Préparation à l'utilisation

1. Ceinture



Disposez la ceinture orthopédique PHALLOSAN® forte face à vous et réglez sa taille à la plus grande longueur au moyen de la boucle coulissante (B).

2. Choix de la cloche d'aspiration/du manchon d'étanchéité

A l'aide du gabarit de mesure (7) déterminez la taille de la cloche d'aspiration. Écartez le pénis du corps et mesurez la hampe du pénis flasque.



La cloche de taille M (2c) est déjà associée au manchon d'étanchéité de taille M (2c) et à la patte de traction dans le kit.

Si vous avez besoin d'une autre taille, enlevez la patte de traction (3).

Prenez la cloche d'aspiration correspondante et raccordez-la à la pompe d'aspiration, elle s'enclenche seulement en position avec le symbole flèche (↑). Le manchon d'étanchéité correspondant (2) doit recouvrir le bourrelet de la cloche puis remettre en place la patte de traction (3).



Lors de la mise en place, il faut impérativement s'assurer que le bourrelet de la cloche s'insère dans la rainure du manchon d'étanchéité à l'extrémité épaisse du manchon d'étanchéité. Si le manchon d'étanchéité est tiré plus loin que le

bourrelet de la cloche, il peut se déchirer.




Haut: Faux, tiré trop loin sur la cloche et non poudré!

Bas: Correct, et poudré.

Veillez noter que le manchon d'étanchéité perd son revêtement après quelques jours. Nous vous recommandons d'acheter du talc pour bébé et de l'appliquer sur la surface externe du manchon d'étanchéité. Il formera une couche protectrice, qui protège le manchon d'étanchéité contre les frottements, les adhérences et les déchirures.

Fixez la ventouse il entre vos genoux. Déroulez délicatement le manchon d'étanchéité 1 cm à

manchon jusqu'au bord de la cloche d'aspiration et tirez-le doucement par-dessus le bourrelet de la cloche. Faites attention de ne pas endommager le manchon d'étanchéité par exemple avec un angle. Ne pas tirer trop fort en déroulant.

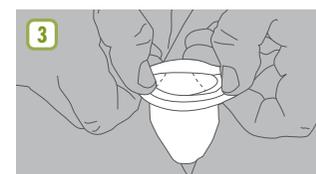



Particularités des nouveaux manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte

Les manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte sont en silicone médical, ce qui exclut les irritations ou les réactions allergiques. Cette innovation vous offre un meilleur confort, le manchon d'étanchéité s'adapte parfaitement sur le pénis. Il a une épaisseur de 3 mm environ au niveau de la fixation sur la cloche, sa partie la plus fine fait 0,3 mm d'épaisseur, afin de bien mouler le pénis.

La cloche d'aspiration est maintenant prête à être posée!

3. Capuchon de protection

Prendre le capuchon de protection (4/5), adapté à toutes les tailles de pénis. écartez le capuchon avec le pouce et l'index de chaque main et recouvrez le gland. Il doit être bien ajusté.

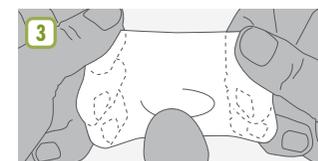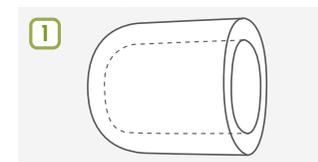

Important: après la mise en place du capuchon, il doit y avoir le moins d'air possible au bout du gland. Il est préférable de poser le capuchon sur le pénis légèrement en érection. Le capuchon protège le gland contre les effets secondaires d'une éventuelle traction trop forte.

Les utilisateurs expérimentés peuvent se passer du capuchon après quelques semaines.

Toutes les étapes de préparation à l'utilisation sont maintenant terminées.

Utilisation:

1. Insérer maintenant le pénis recouvert du capuchon de protection dans la cloche d'aspiration puis dérouler le manchon d'étanchéité du bourrelet de la cloche sur le pénis.



2. Tournez la marque verte de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) vers le symbole aspiration et activez la pompe d'aspiration, en la pressant plusieurs fois avec vos doigts. Le gland est aspiré plus loin dans la cloche. Le manchon d'étanchéité s'applique étroitement sur la hampe du pénis.




3. Placez maintenant le clapet vert de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) sur le symbole verrou, pour maintenir le micro-vide.



4. Prendre la ceinture que vous avez préparée et passer l'anneau en mousse blanche (A) sur l'ensemble de la cloche d'aspiration jusqu'à atteindre la base du pénis.
5. Enrouler la ceinture sur vos hanches.
6. Tourner l'agrafe de la patte de fixation (3) avec sa partie ouverte vers votre corps et relier les deux anneaux (C).



7. Renforcez le serrage de la ceinture au moyen de la boucle à poussoir (B), jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement du pénis et que le voyant devienne vert. Veillez à placer la ceinture dans l'aîne, en biais vers le haut. Tirer la ceinture en haut des fesses vers la taille. Si la ceinture se trouve près de la raie des fesses, la tension va augmenter en position assise, ce qui n'est pas souhaitable.

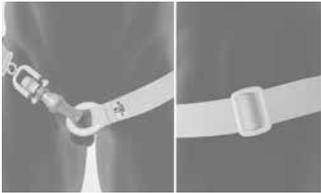

8. Vous pouvez maintenant vaquer à vos occupations quotidiennes ou même porter PHALLOSAN[®] forte pendant la nuit, car la circulation sanguine n'est à aucun moment entravée.

Fin de l'utilisation

Retirez la ceinture puis tournez le la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration en position flèche. Le vide s'arrête. **Veillez dérouler le manchon d'étanchéité avec douceur, en direction de la coupe en plastique dur, et enlever l'ensemble de l'appareil d'aspiration. Ne pas étirer le manchon d'étanchéité avec vos doigts pour éliminer le vide d'air, au risque de le déchirer immédiatement.** Roulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez le dispositif d'aspiration.

Spécificités techniques

D'un point de vue simplifié, il s'agit d'une cloche d'aspiration avec une étanchéité. Il n'est donc pas important de remonter le manchon d'étanchéité très haut sur la hampe pénienne. Le manchon d'étanchéité n'est pas conçu pour transférer la force vers le pénis. La force est uniquement transmise par le micro-vidé formé dans la cloche d'aspiration.

Si vous constatez que le vide semble fuir et que

le gland glisse hors de la cloche d'aspiration, ceci peut avoir plusieurs causes. Dans tous les cas il y a une entrée d'air. Elle peut se produire au niveau de la hampe, si la pilosité intime n'a pas été soigneusement retirée, ou si un manchon d'étanchéité trop grand a été choisi.

Si nécessaire, enlevez les poils du pubis. Vous pouvez utiliser un rasoir ou une crème dépilatoire douce.

Remèdes

Tournez la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration du symbole verrou vers le symbole aspiration.

Placez le gland dans la cloche et fermez le clapet en tournant la marque verte vers le symbole verrou.

Si le gland glisse encore hors de la cloche, la cause est très certainement la taille trop grande du manchon d'étanchéité.

Vous pouvez adapter la taille vous-même, afin d'atteindre une efficacité maximale. Si vous sentez par ex. la cloche de M à la bonne taille, mais que le manchon d'étanchéité est trop grand dur la hampe pénienne, vous pouvez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche M. Vous pouvez faire la même chose avec la cloche L et le manchon d'étanchéité M.

En aucun cas, vous ne devez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche L. La matière se déchirerait.

Entretien FORTE/PLUS:


Le manchon d'étanchéité doit être enlevé de la cloche d'aspiration et pour des raisons d'hygiène, il faut le laver à la main avec de l'eau chaude et du savon.

Conservez le manchon d'étanchéité déroulé jusqu'à sa prochaine utilisation.

N'oubliez jamais de le saupoudrer de talc pour bébé après utilisation en position déroulée.

La cloche d'aspiration devrait également être nettoyée quotidiennement comme décrit ci-dessus. Enlever auparavant la pompe d'aspiration, en tournant la marque verte du clapet de la pompe vers la double flèche. Retirer délicatement la pompe de la cloche d'aspiration. La pompe ne doit jamais rentrer en contact avec l'eau ou les matières grasses, ce qui endommagerait les clapets fragiles.

Crans de réglage pour adapter précisément la force de traction de la ceinture sur le tissu conjonctif du pénis.

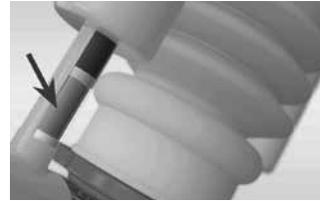

Avant-propos:

Le tissu conjonctif du corps dépend de la disposition héréditaire de chaque individu. Pour cela, nous avons développé un système de couleurs qui vous permet d'adapter parfaitement la tension de la ceinture à votre tissu conjonctif. Veillez dans tous les cas à maintenir la traction dans la zone verte. Vous atteindrez ainsi les meilleurs résultats d'agrandissement du pénis en longueur et en diamètre, sans effets secondaires.

1er jour

Régler la tension de ceinture dans la zone inférieure verte et portez PHALLOSAN[®] seulement 1 heure. Enlevez la ceinture et tournez la marque verte du clapet vers le symbole flèche. Le vide s'atténue.

Enroulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez la cloche d'aspiration.

Examinez maintenant la zone située entre l'ouverture de l'urètre et le frein du prépuce (Frenulum) à la partie inférieure du gland. Cette zone contient le tissu conjonctif le plus sensible du pénis. Si elle est rouge ou gonflée, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation pour la journée. Si vous constatez des modifications sur le pénis, reprenez l'utilisation seulement après la disparition des symptômes.

2ème jour au 8ème jour

Si vous avez utilisé PHALLOSAN[®] forte la veille sans avoir de rougeur ni de gonflement de la zone décrite ci-dessus, vous pouvez porter PHALLOSAN[®] une heure de plus.

Augmentez la période d'utilisation d'une heure chaque jour. Après 8 jours l'habitude sera prise.

PHALLOSAN[®] peut être aussi porté pendant

la nuit après la période d'adaptation. Vous remarquerez que des petites marques en relief sont placées près des symboles d'aspiration et de verrouillage, afin de permettre l'utilisation sans contact visuel. Le manchon d'étanchéité s'étire dans le cas d'une érection nocturne, la circulation sanguine n'est pas entravée, mais elle est améliorée.

Vous porterez PHALLOSAN[®] forte avec enthousiasme, votre pénis va augmenter en longueur et en volume au cours des semaines. Vous ressentirez des effets secondaires positifs, tels qu'une augmentation du désir et du plaisir sexuel.

Durée d'utilisation:

PHALLOSAN[®] devrait être porté 8 à 10 h par jour, 6 jours par semaine, voire plus longtemps!

Effets secondaires / Précautions d'utilisation

Vous utilisez PHALLOSAN[®] forte à vos risques et périls, cependant en respectant le mode d'emploi vous ne courez aucun danger. Il faut en particulier éviter l'excès de tension sur le pénis pendant les premières semaines d'utilisation.

Si un gonflement et/ou des cloques apparaissent sur le prépuce ou sur le gland, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation jusqu'à la disparition des rougeurs ou des cloques. Réglez la tension moins forte. Veuillez SVP être patient, le succès du processus est comparable à un alignement dentaire. La continuité de l'allongement est le garant de la réussite, non pas la force de traction! Si vous ressentez parfois une douleur de la hampe due à la pression, il est probable que la partie renflée du manchon d'étanchéité repose sur l'anneau en silicone et provoque une douleur.

Tout incident grave relatif au dispositif est notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Remède:

Roulez l'extrémité du manchon d'étanchéité hors de l'anneau en silicone, la douleur causée par la pression devrait disparaître.

Vous pouvez aussi répartir la tension de la ceinture sur le corps, afin de réduire la traction de la base du pénis. Entourez la ceinture à l'endroit de la liaison avec la cloche et passez la ceinture

autour du corps pour soulager la base du pénis. Cela semble compliqué, mais ne l'est pas en réalité, la tension se répartit dans l'ensemble de la ceinture.

Contre-indications:

Après la consommation d'alcool, la prise de drogues ou de médicaments antidouleur, somnifères ou tranquillisants, car cela pourrait modifier la perception de la douleur et vous empêcher de réagir à temps. Renoncez à l'utilisation de PHALLOSAN[®] forte en cas d'infection ou de plaie ouverte du pénis.

Comment puis-je mesurer l'augmentation exacte de la longueur de mon pénis?

Utilisez une règle ou un mètre pliant. Un mètre souple ou à enrouler n'est pas adapté. Maintenez le pénis flasque perpendiculairement à votre corps (90 degrés). placez la règle sur le côté du pénis vu de haut. Appuyez la règle contre l'os pubien.

Important

Au début du traitement, vous devez mesurer votre poids corporel exact sans vêtements. En cas de prise de poids éventuelle, une couche de graisse se forme particulièrement dans la zone pubienne et du pénis. Cette couche adipeuse réduit la distance entre le bout du pénis et l'os pubien et fausse (diminue) le résultat de la mesure. Les médecins appellent cela un tablier abdominal.

Commandes d'appoint

Toutes les pièces de PHALLOSAN[®] forte peuvent être commandées individuellement. Pour toute question ou suggestion, nos experts sont à votre disposition à tout moment et gratuitement, au tarif téléphonique en vigueur.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, qui seront publiées sur internet

www.phallosan.fr

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN[®] forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veillez lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser PHALLOSAN® plus.

Ceci est un kit supplémentaire pour PHALLOSAN® forte qui ne peut être utilisé qu'en association avec le kit PHALLOSAN® forte! Concernant les instructions relatives à PHALLOSAN® forte, veuillez vous rendre sur www.phallosan.info

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® plus+:

1. Adaptateur-levier
 - » applicable à toutes les dimensions de cloche
 - » déplacement souple
 - » clip de sécurité
 - » facile à retirer
 - » breveté
2. Système à fourche de traction avec anneau de base blanche
 - » peut être allongé à toutes les dimensions de pénis
 - » tension optimale
 - » possibilité de force élevée ou de confort
3. Capuchon protecteur
 - » protection pressurisée de la zone du gland
 - » résultats améliorés grâce à
 - » avantage de force
 - » avantage de sécurité
 - » une performance plus élevée

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® forte:

4. Cloche en plastique dur avec manchons-préservatifs fixés
 - » jusqu'à 4 tailles pour toutes les morphologies
 - » protection transparente
 - » taille moyenne optimale (grande cloche-manchon moyen)
 - » matériau non-allergène
 - » système à 3 valves
 - » quand le confort rencontre l'efficacité
5. Pompe à vide intégrée
 - » crée un micro-vide
 - » sans danger pour les tissus/corps spongieux/veines
 - » résultats améliorés
 - » rendement maximal




Préparation:

1. Sélection de la ventouse / du manchon d'aspiration (issus du kit PHALLOSAN® forte)


Sélectionnez à l'aide du patron de mesure les tailles de cloche en plastique dur et de préservatif-manchon adaptées à vos besoins. Étirez le pénis non érigé et mesurez-en la taille.

Fixez la pompe à vide sur la cloche en plastique dur; elle s'enclenche uniquement dans la position marquée d'une flèche (↑). Tournez-la vers le symbole de la pompe (⚡).


Enroulez le préservatif-manchon par dessus la cloche en plastique dur. Lorsque vous fixez le manchon à la ventouse, assurez-vous que la partie épaisse (la rainure) du manchon est positionnée exactement sur le rebord de la cloche en plastique dur.

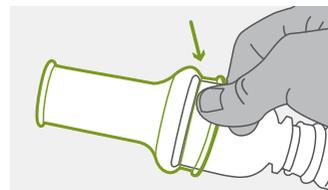

Si le manchon est trop tiré par dessus le rebord, il risque d'être endommagé.

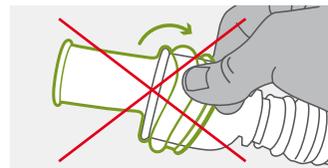

Roulez avec précaution le manchon vers le rebord de la ventouse en laissant un espace de 1 cm entre le manchon retroussé et le rebord de la ventouse.


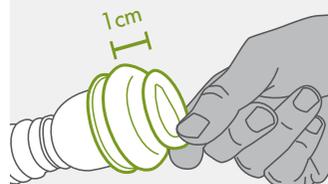


Vous pouvez à présent tirer facilement le manchon retroussé derrière la bille de ventouse. Mettez la ventouse et le manchon roulé de côté et passez à l'étape suivante.



2. Capuchon protecteur

Démontez le capuchon protecteur à deux mains et enfitez-le sur le gland. Il doit être agréable à porter mais serré.

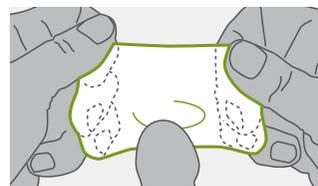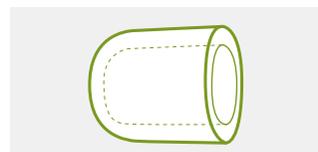


Après avoir mis le capuchon protecteur en place, il est important de s'assurer qu'au moins un peu d'air que possible ne se trouve sur la pointe du gland.

Mettez à présent de côté l'ensemble cloche en plastique dur/manchon/pompe.

3. Système à fourche de traction


Saisissez le système à fourche de traction et maintenez l'anneau de base blanche près de la racine du pénis. Allongez ou raccourcissez les tiges de fourche afin qu'elles soient 5 cm (2 pouces) plus longues que le pénis non érigé.

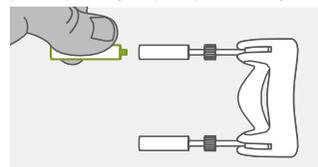

Placez l'anneau de base blanche au dessus de votre pénis (idéalement en position assise). Fixez l'adaptateur-levier sur l'extrémité des tiges.

Utilisation:


1. Prenez maintenant le kit cloche en plastique dur/manchon/pompe préparé. Placez le gland à mi-chemin dans la cloche et déroulez le préservatif-manchon aussi loin que possible.

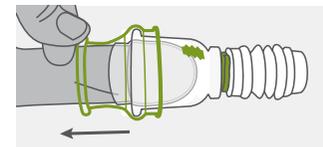

2. Actionnez la pompe 3 à 5 fois et tournez la valve verte vers le symbole de verrouillage.




3. Pressez enfin les tiges avec l'adaptateur-levier vers le bas et fixez le clip C sur la cloche en plastique dur. C'est tout.

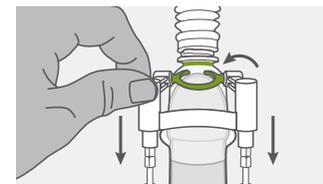

4. Vous devriez ressentir et voir l'étiement de votre pénis.

Important: il n'est pas nécessaire d'appliquer une force élevée. Uniquement la continuité permet d'atteindre les meilleurs résultats.

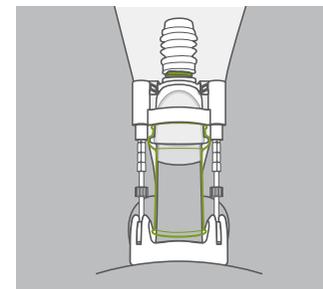

Comment retirer PHALLOSAN® plus+:

Tournez tout d'abord la valve verte de la bille de pompage vers le symbole de la flèche. Le vide disparaît. Enroulez avec précaution le manchon vers la ventouse en plastique dur et retirez le dispositif d'aspiration complet. **Ne pas étirer le manchon avec vos doigts. Il risquerait de se déchirer.** Il se laisse retirer facilement en enroulant simplement le manchon vers le haut.

Effets secondaires / Précautions

PHALLOSAN® plus+ est utilisé aux risques et périls de l'utilisateur, mais il est sûr si le mode d'emploi est respecté. Cependant, surtout au cours des premières semaines d'utilisation, il ne faut pas tirer trop fort sur le pénis.

Si un gonflement et/ou des cloques apparaissent sur le prépuce ou le gland, la prise est trop forte. Il est essentiel de faire une pause jusqu'à ce que le gonflement ou les ampoules aient guéri.

Ensuite, réglez la tension un peu plus légèrement. Soyez patient, la procédure est comparable en termes de succès à un ajustement de la mâchoire. La continuité de l'étirement, et pas seulement la force de la tension, est le garant de la réussite !

Attention : L'utilisation de Phallosan plus n'est pas adaptée pendant le sommeil ! Veuillez utiliser PHALLOSAN® forte à cet effet.

Vous avez à présent la parfaite combinaison de traction. Qu'importe l'objectif d'utilisation:

Allongement du pénis:

Utilisez l'adaptateur-levier pendant au moins 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une force élevée. Uniquement la continuité permet d'assurer une stimulation cellulaire. Ainsi, de nouvelles cellules sont créées. Un allongement de 4,8 cm (1,9 pouces) tout comme une augmentation de la circonférence de 2,8 cm (1,1 pouces) peuvent être atteints.

Dysfonction érectile:

5 heures par jour et 3 jours par semaine permettent d'obtenir une circulation sanguine beaucoup plus élevée afin de stimuler votre prostate et votre désir sexuel. Les corps spongieux sont ainsi capables d'emmagasiner da-

vantage de sang conduisant ainsi à des érections plus fréquentes et plus durables.

IPP/Courbure du pénis :

L'IPP/la courbure du pénis peut être traitée en associant PHALLOSAN® forte et l'adaptateur-levier. Important : utilisez PHALLOSAN® forte pendant 4 jours par semaine et l'adaptateur-levier pendant 2 jours afin de redresser la courbure. La courbure sera complètement redressée et de nouvelles cellules seront créées dans le tissu cicatriciel autour de la zone courbée. Cette technique permet de redresser complètement le pénis.

Hotline:

E-Mail: service@swissana.com

Pour davantage d'informations:

www.phallosan.info

Toute l'équipe de PHALLOSAN® forte



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT!

AVERTISSEMENT: VOUS DEVEZ PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous urinez, lors de la pratique des activités sportives, durant des rapports sexuels ou d'autres activités physiques intensives. Il ne doit pas non plus être porté après la consommation d'alcool, l'ingestion d'analgésiques ou de substances euphorisantes, ou encore :

- si vous constatez certaines zones blessées ou infectées sur le pénis ou toute autre zone où PHALLOSAN® est attaché au corps.
- si vous ressentez des douleurs, un engourdissement ou une décoloration sur la tête du pénis,
- si toute autre réaction indésirable apparaît, vous devez détacher et retirer immédiatement l'appareil.

Si des blessures se trouvent sur votre pénis, l'appareil ne doit pas être porté jusqu'à guérison complète de la zone abîmée.

Dans le cas d'une chirurgie, ne pas utiliser PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ avant l'autorisation de votre médecin.

Ne pas utiliser PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ si vous souffrez de problèmes veineux ou de faiblesse des tissus conjonctifs.

Ne pas utiliser l'appareil si vous avez toute sorte de piercing aux organes génitaux.

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous vous déplacez dans des zones induisant un risque accru de chutes, et faire preuve de la plus grande prudence en montant des escaliers, en marchant sur des sols glissants etc.

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous manipulez tout type de machine, véhicule motorisé ou objets chauds, ou lorsque vous faites du vélo ou la cuisine.

Ne pas utiliser de crème, vaseline ou autres substances hydratantes lorsque vous portez/utilisez l'appareil.

Utilisez exclusivement l'appareil comme décrit dans ce manuel, ne pas utiliser tout autre matériel que celui fourni, ou n'utilisez pas d'autres techniques de port que celles décrites dans ce manuel.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation de produits et services achetés via ce site Internet, qu'il s'agisse de dommages indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (notamment, mais non exclusivement, les dommages tels qu'une perte d'activité, une perte de profit, une interruption d'activité ou tout dommage similaire). Pour toute question portant sur les conditions d'utilisation décrites ici, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

En cas de risques ou d'effets secondaires
veuillez contacter votre médecin
ou notre ligne d'assistance Phallosan



REF 5000

